



Um equipamento
hematologia
imunoensaios
química clínica



**Produto
Português**



O **spinit®** é um equipamento de Point-of-Care para a quantificação de parâmetros no sangue. Este foi desenvolvido para realizar testes de diagnóstico utilizando apenas uma gota de sangue e os descartáveis **spinit®**.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Um equipamento: **hematologia, imunoensaio, química clínica**
- Necessita apenas de uma gota de sangue
- Resultados rápidos
- Elevada precisão
- Resultados quantitativos

Equipamento spinit®

- Não é necessária manutenção
- Sem necessidade de calibrações
- Equipamento de pequenas dimensões
(236x215x306 mm - 4 kgs)
- Configurações personalizáveis



PROCEDIMENTO:



1. Clique no botão [Iniciar] para dar início a um teste.



2. Utilize uma lanceta esterilizada para fazer a colheita da amostra.



3. Utilize uma tira spinit® para recolher a amostra de sangue.

ACESSÓRIOS

- **Leitor de código de barras** - para leitura do código de barras da amostra/disco descartável/identificação do paciente
- **Impressora** - opção de impressão de resultados em etiquetas padrão



INTERFACE DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

- Ecrã tátil LCD
- Interface de uso fácil e intuitivo
- É executado um controlo interno cada vez que é iniciado um teste
- Para relizar um teste, basta seguir as instruções no ecrã e inserir um disco já preparado no equipamento

CONECTIVIDADE




- 2 portas USB
- Ligação Ethernet
- Ligação por endereço IP
- Protocolo HL7 - LIS/HIS



4. Insira a amostra de sangue no disco.




5. Insira o disco no equipamento e siga as instruções no ecrã.

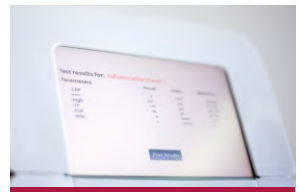

6. Veja os resultados no ecrã, imprima ou transfira automaticamente os dados para o LIS/HIS.

spinit® CRP

- Teste para a quantificação da concentração de proteína C-reativa em amostra de sangue
- Intervalo de deteção: 2-300mg/L
- Uma gota de sangue - 8µL

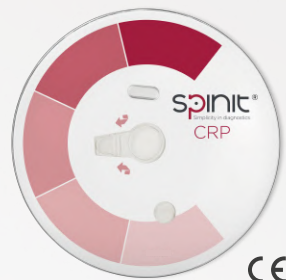

spinit® BC

- 5 partes diferenciais: neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos
- Uma gota de sangue - 8µL

spinit® HbA1c

- Medição da Hemoglobina glicada (HbA1c)
- Uma gota de sangue - 8µL



DESENVOLVIDO E PRODUZIDO POR BIOSURFIT SA

Rua 25 Abril nº66,
2050-317 Azambuja, Portugal
info@biosurfit.com

Empresa certificada pela ISO 13485
Certificado pela TÜV Rheinland
www.biosurfit.com

